

# つけて安心サポーター 足首用

## [足首用サポーター]

### 使用説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。  
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

#### 【用途】

- 足首のサポート

#### 【はじめにお読みください】

- 本製品は右足用・左足用があります。左右を確認のうえ、使用してください。
- 本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本製品は足首の疾患を治療できるものではありません。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.6にあります。

#### 【ご使用にあたって】

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- 自動車などを運転される際はサポーターを外してください。サポーターを装着することにより、運転に支障が出る場合があります。

## 【使用上の注意—必ずお読みください—】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

⚠ 警告… 誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

⚠ 注意… 誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

### ⚠ 警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
  - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
  - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
  - ・足首以外の部位に使用しないでください。
  - ・サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書の P.6 にあります)。
  - ・就寝時は使用しないでください。
  - ・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
  - ・上下、表裏、前後を正しく使用してください。
  - ・装着手順に従って正しく使用してください。
  - ・サポーター本体やストラップをきつく締めすぎないでください。
  - ・使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
  - ・本製品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
  - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
  - ・つけごこちが悪いなど違和感がある場合。
  - ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

### ⚠ 注意

- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、必ず靴下などの上から装着し、肌に直接当てないでください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地へ色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

## 【お手入れ方法】


### ⚠注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。


- 本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体、またはストラップにとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

## 【各部の名称】


※本製品には右足用・左足用があります。図は右足に装着しています。

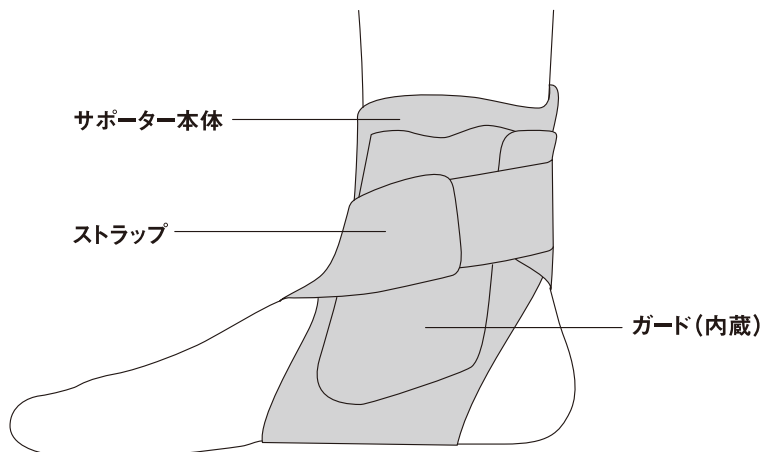

### <製品前面>

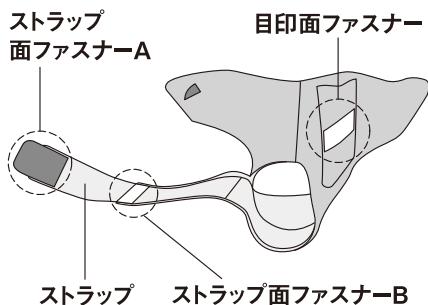


### <製品後面>

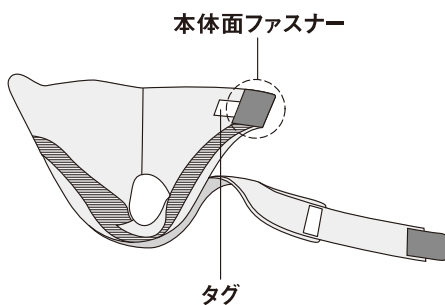

## 【装着手順】


- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意ー必ずお読みくださいー】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右足の場合です。左足に装着する場合も同じように装着してください。

**1** サポーター本体およびストラップの面ファスナーをすべて取り外し、製品の上下・表裏・前後を確かめてください。

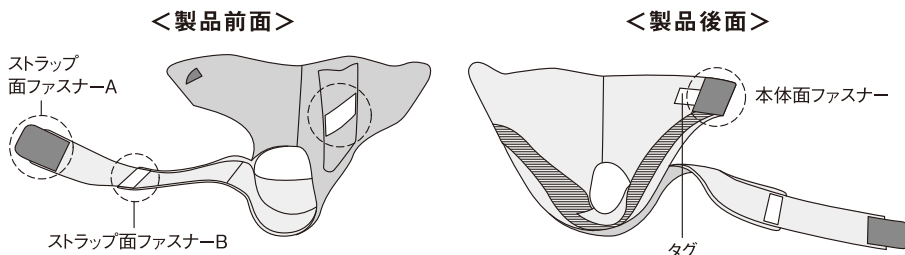


サポーター本体裏側のタグがついている方が上で、体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

**2** サポーターに足を入れて履き込みます。

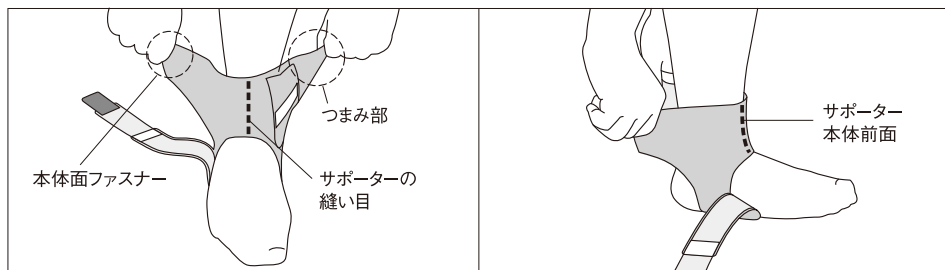


本体面ファスナー部とつまみ部を上にして両手で持ち、サポーターに足を入れ、サポーターの本体前面がすねに当たるまで履き込みます。その際、サポーターの縫い目が、足の前面にくるように合わせます。


**3** 本体の面ファスナーをとめます。

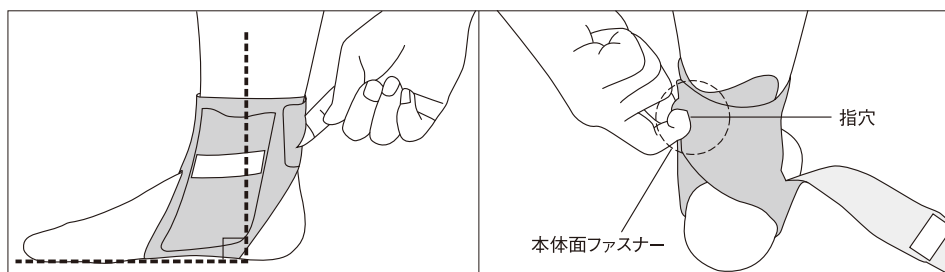

足の裏を床につけて足首を直角にした状態で、本体面ファスナーを斜め上に引き上げるように足に巻きつけてとめます。その際、指穴に指をひっかけると、簡単にサポーターを引っ張れます。

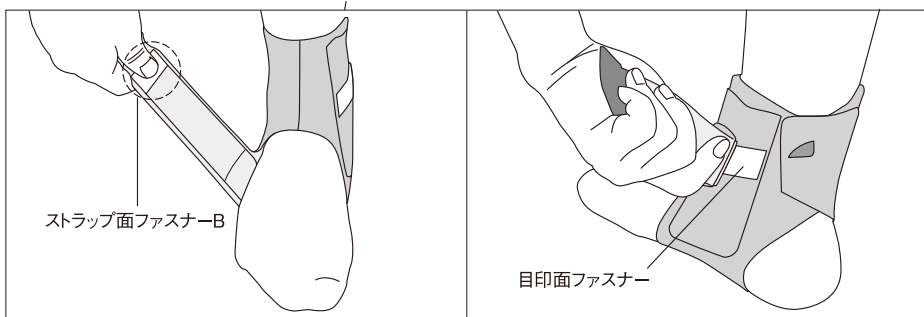**4** ストラップを引き上げて、ストラップ面ファスナーBをとめます。

ストラップのストラップ面ファスナーB部分を持ち、目印面ファスナーの位置を目安に、ストラップ面ファスナーBをとめます。その際、ストラップを締めすぎないようにしてください。

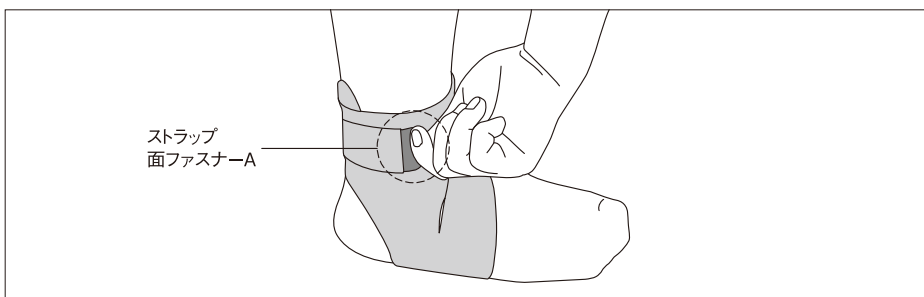**5** ストラップを足の後ろへ回し、ストラップ面ファスナーAをとめます。

そのままストラップを足の後ろへ回して、サポーター本体外側にストラップ面ファスナーAをとめます。

**6** サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。**装着完了時 (右足の場合)**

## 【素材】

素材	
繊維	ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
繊維以外	ポリウレタン、ポリエチレン

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

## 【サイズ表】

サイズ		適用範囲（シューズサイズ）	1箱入数
右M	左M	21cm ～ 25cm	1コ
右L	左L	25cm ～ 29cm	1コ

## ●サイズの選び方

日常使用しているシューズサイズに合わせて選んでください。シューズサイズが2サイズのさかい（25cm）になった場合は、女性はMサイズ、男性はLサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。



〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-111-3410（通話料無料） FAX.0800-222-3410（通信料無料）

受付時間：10時～17時（平日）※土日、祝日、年末年始を除く

パッケージを廃棄する際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

パッケージ本体：段ボール（古紙配合率約90%）